



# STAY YOUNG COLLECTION.

FORMAS JÓVENES PARA  
UNA NUEVA GENERACIÓN.

---

BY CANDULOR



ORIGINAL  
SWISS  
DESIGN

# PHYSIOSELECT TCR

A partir de las formas dentales acreditadas se desarrolló el diseño fresco y juvenil de PhysioSelect TCR. Los dientes diseñados en Suiza se componen del material de confianza TwinCrossedResin<sup>[1]</sup>. Para el nuevo estilo de vida de toda una generación: los «best ager» jóvenes de corazón:

LA STAY YOUNG COLLECTION.

---

## SUS CLIENTES DE MAÑANA.

La generación de los «best ager»  
jóvenes de corazón.

En la actualidad hay una nueva generación de clientes que quiere conservar su juventud en todos los aspectos: conservar la movilidad y permanecer ágiles hasta una edad avanzada, y esto sin perder el aspecto juvenil. Para satisfacer este deseo de sus clientes hemos desarrollado PhysioSelect TCR.




# INDICACIONES CON EFECTO REJUVENECEDOR.

Juvenil, auténtico y funcional.



## PRÓTESIS TOTAL

- › Relación diente a diente
  - › Relación diente a dos dientes
- 

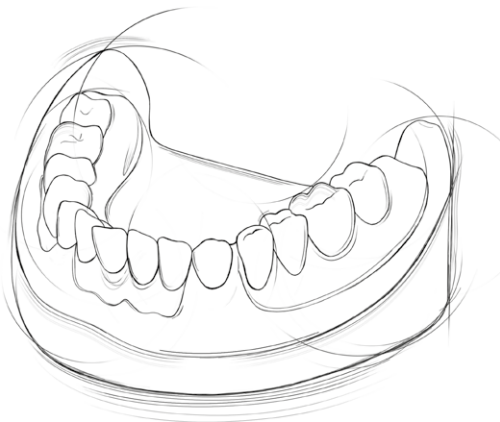

## PRÓTESIS PARCIAL

- › Prótesis parciales de resina y metálicas<sup>[4]</sup>
  - › Dentadura combinada<sup>[4]</sup>
-

# FORMAS JUVENILES PARA EL ASPECTO «BEST AGER» PERFECTO.

## Vista general de la amplia variedad.

Las atractivas y revalidadas formas dentales se han rejuvenecido para crear un surtido juvenil adaptado. 18 formas superiores en los estilos Elegante, Marcado y Universal, y 4 formas inferiores cubren toda la gama de sus clientes «best ager». Para una nueva sensación vital en la mejor edad.

## LOS BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD DE FORMAS JUVENILES

### › **Paciente**

PhysioSelect TCR refuerza la sensación vital juvenil de sus pacientes «best ager».

### › **Técnico dental**

Amplio surtido de formas y tamaños para las prótesis parciales y totales<sup>[4]</sup> en el laboratorio.

### › **Odontólogo**

Una colección para la rehabilitación óptima de los pacientes «best ager» que desean un aspecto juvenil.

**ELEGANTE** Grupo 5  
femenino

- › Morfología de la corona de líneas gráciles con una estructura discreta de los mamelones



**UNIVERSAL** Grupo 6  
unisex

- › Morfología de uso universal



**MARCADO** Grupo 7  
masculino

- › Fuerte caracterización mediante formas marcadas con contornos angulosos



# EL MATERIAL: TWINCROSSEDRESIN


## Propiedades

El material TCR altamente reticulado se destaca por sus propiedades y su resistencia<sup>[1]</sup>.

El material TCR (TwinCrossedResin) es una variante modificada de polimetilmetacrilato (PMMA), en la que tanto el polímero como la matriz presentan una reticulación cruzada uniforme. Esto se consigue porque, durante el proceso de producción, el polímero reticulado previamente se vuelve a reticular junto con la matriz. De este modo, en estos dientes protésicos queda garantizada una buena resistencia a la abrasión<sup>[2]</sup> y a la formación de placa<sup>[1]</sup>.

### TWINCROSSEDRESIN

Material de PMMA altamente reticulado con uniones transversales intensificadas entre las cadenas de polímeros.

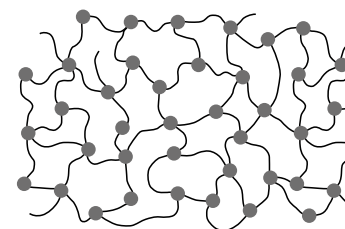

 Cadenas de polímeros     Uniones transversales intensificadas



# ASPECTO Y TEXTURA DE LA NUEVA COLECCIÓN

Tan joven como tú quieras.

¿Cómo se consigue un diseño de los dientes tan juvenil? El PhysioSelect TCR es una composición de contornos incisales ligeramente translúcidos con mamelones discretos y efectos translúcidos en las crestas marginales, combinados con una estratificación cuádruple llena de expresividad y una refracción de la luz<sup>[3]</sup> incisal.

Una fina microestructura con surcos de desarrollo horizontales, además de una marcada macroestructura con crestas verticales, surcos y pequeños orificios dotan al diente de una refracción de la luz<sup>[3]</sup> naturalmente juvenil.



Vista desde el lateral - PhysioSelect TCR



Vista desde el lateral - BonSelect TCR



MONTAJE ÓPTIMO.  
REHABILITACIÓN ÓPTIMA.  
BONSELECT TCR.

El diente posterior multifuncional.

---



El nuevo diente posterior BonSelect TCR se ha creado adaptado al PhysioSelect TCR: un diente posterior con un concepto de oclusión que se puede utilizar de manera multifuncional para los sistemas de montaje más habituales.

Tanto en la relación diente a diente como diente a dos dientes, el BonSelect TCR posee una geometría de diente bifuncional que permite ambos sistemas de montaje. Una localización simplificada de la céntrica mediante puntos de contacto definidos permiten una oclusión fácil de ajustar. El BonSelect TCR es una buena elección

para aquellos laboratorios que utilizan diferentes conceptos de montaje. La estratificación está ajustada a la línea de dientes anteriores PhysioSelect TCR. Armonía en el diseño y la función.

### ¿MÁS FORMAS DE TCR?

Descubra toda la diversidad TwinCrossedResin con 18 formas juveniles PhysioSelect TCR y 22 formas dentales PhysioSet TCR adaptadas a la edad.

- [1] Teichmann S, Verification Report TCR neu, 2019.
- [2] Rosentritt M, Three.body wear (ACTA) and contact wear (POB) of denture teeth, Study Report, Universitätsklinikum Regensburg, 2015.
- [3] Stange M, Report on esthetics for PhysioSelect TCR, CANDULOR AG, 2022.
- [4] Suwannaroop P et al., Dent. at. J. 2011, 30, 461 – 468.



CANDULOR AG

Boulevard Lilienthal 8 / CH-8152 Glattpark (Opfikon) / T +41 (0) 44 805 90 00 / F +41 (0) 44 805 90 90 / [candulor.com](http://candulor.com) / [candulor@candulor.ch](mailto:candulor@candulor.ch)