



STAY YOUNG COLLECTION.

FORME GIOVANI PER UNA
NUOVA GENERAZIONE.

BY CANDULOR



ORIGINAL
SWISS
DESIGN

PHYSIOSELECT TCR

Dalla stessa fonte di forme dentali collaudate è stato sviluppato il design fresco e giovanile della linea di denti PhysioSelect TCR. I denti progettati in Svizzera sono realizzati con il materiale affidabile, chiamato Twin-CrossedResin. Ciò assicura una nuova sensazione di benessere vitale che caratterizza un'intera generazione, quella della seconda giovinezza o dei «Best Ager»:

LA STAY YOUNG COLLECTION.



I SUOI CLIENTI DI DOMANI.

La generazione dei «Best Ager» o
generazione della seconda giovinezza.

Oggi, c'è una nuova generazione di clienti che desiderano rimanere giovani, attivi e agili fino ad età avanzata, senza perdere la radiosità della gioventù. Proprio per soddisfare questa esigenza dei Suoi clienti è stata sviluppata la linea di denti PhysioSelect TCR.

INDICAZIONI PER UN EFFETTO RINGIOVANENTE.

Giovane, autentico e funzionale.



PROTESI TOTALE

- › Rapporto dente a dente
 - › Rapporto dente a due denti
-



PROTESI PARZIALE

- › Protesi in resina parziali
e protesi scheletrate
 - › Protesi combinata
-

FORME GIOVANILI PER UN LOOK «BEST AGER» PERFETTO.

La varietà in sintesi.

Le collaudate e belle forme dentali sono state «ringiovanite», diventando una linea che ha come filo conduttore un look fresco e giovanile. 18 forme per l'arcata superiore nelle categorie Delicati, Accentuati e Universali e 4 forme per l'arcata inferiore coprono l'intera gamma di esigenze dei Suoi clienti «Best Ager». Per una nuova sensazione di benessere vitale nell'età migliore.

I VANTAGGI DELLA VARIETÀ DI FORME GIOVANILI

› **Paziente**

La linea di denti PhysioSelect TCR rafforza la sensazione di benessere vitale giovanile dei Suoi pazienti «Best Ager».

› **Odontotecnico**

Ampio assortimento di forme e misure per la realizzazione quotidiana di protesi parziali e totali in laboratorio.

› **Odontoiatra**

Una linea di denti per soddisfare in maniera ottimale le esigenze protesiche di un look giovanile dei pazienti «Best Ager».

DELICATI Gruppo 5
femminili

- › Piacevole morfologia delle corone con struttura discreta dei mammelloni



UNIVERSALI Gruppo 6
unisex

- › Morfologia d'impiego versatile



ACCENTUATI Gruppo 7
maschili

- › Caratteristiche marcate con forme accentuate e profili spigolosi



IL MATERIALE: TWINCROSSEDRESIN


Materiale di qualità noto da decenni per la sua resistenza.

La resina ad alto grado di reticolazione TCR si distingue per le sue notevoli caratteristiche fisiche e di resistenza.

La resina TCR (TwinCrossedResin) è una variante modificata del polimetilmetacrilato (PMMA), basata su una reticolazione uniforme con legami trasversali sia del polimero che della matrice. Questo risultato si ottiene con un processo produttivo in cui il polimero prereticolato viene reticolato nuovamente con la matrice. Vengono così garantite la resistenza all'abrasione e la resistenza alla placca ottimali che caratterizzano questi denti per protesi.

TWINCROSSEDRESIN

Reticolo di PMMA ad alto grado di reticolazione con numerosi legami trasversali tra le catene polimeriche.

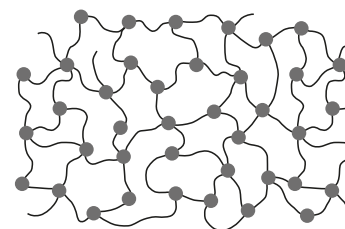

 Catene di polimero  Numerose reticolazioni trasversali

LOOK & FEEL DELLA NUOVA COLLEZIONE

Essere giovani come si vuole.

Come si ottengono denti dal design così giovanile? PhysioSelect TCR è una linea di denti speciale, caratterizzata da profili incisali lievemente traslucidi con mammelloni discreti ed effetti traslucidi delle creste marginali associati a una vivace stratificazione a 4 strati e una rifrazione della luce incisale.

La struttura superficiale equivale a quella di altre linee di denti. Una fine microstruttura con linee di crescita orizzontali e, in aggiunta, un'accentuata macrostruttura con linee e creste verticali e micro aperture assicurano ai denti una rifrazione della luce naturale e giovanile.



Vista di lato - PhysioSelect TCR



Vista di lato - BonSelect TCR



BUON MONTAGGIO DEI DENTI.
BUONA RICOSTRUZIONE
PROTESICA. BONSELECT TCR.

Il dente posteriore multifunzionale.



Per soddisfare i criteri della linea PhysioSelect TCR è stato creato il nuovo dente posteriore BonSelect TCR, caratterizzato da un concetto oclusale che ne consente l'impiego multifunzionale per i sistemi di montaggio più comuni.

Sia nel montaggio dente a dente che in quello dente a due denti, BonSelect TCR presenta una geometria bifunzionale, che rende possibili entrambi i sistemi di montaggio. La registrazione semplificata della posizione in relazione centrica grazie ai punti di contatto definiti consente una facile regolazione dell'occlusione.

Il BonSelect TCR è una buona scelta per i laboratori che applicano varie tipologie di montaggio. La stratificazione è studiata appositamente per la linea di denti anteriori PhysioSelect TCR. Armonia di design e funzione.

ALTRE FORME REALIZZATE IN TCR?

Scopra il grande assortimento TwinCrossedResin con 18 forme giovanili PhysioSelect TCR e 22 forme dentali adeguate all'età PhysioSet TCR.



CANDULOR AG

Boulevard Lilienthal 8 / CH-8152 Glattpark (Opfikon) / T +41 (0) 44 805 90 00 / F +41 (0) 44 805 90 90 / candulor.com / candulor@candulor.ch