

# Gebruiksaanwijzing

Voor rechtstreekse overbrenging van producten van een ander merk (aangezichtsbogen) in de CANDULOR-Articulator met behulp van een gezichtsboogadaptor en een gezichtsbooghoder.

## Girrbach® Gezichtsboog



### De articulator in de nulpositie plaatsen

- De condylusbaanhelling op 0° plaatsen.
- De centrische snelkoppeling sluiten.
- De verticale stift, de houder van de verticale stift en de incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghoder monteren.
- De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator gemonteerd.

### De overbrenging kan zowel axiaal als arbitrair worden uitgevoerd !!

#### Axiale overbrenging :

- De axiale stiften in de gezichtsboog moeten naar het midden gericht zijn. De axiale stiften worden op de articulator op het middelpunt van de assen geplaatst.

#### Arbitraire overbrenging :

- De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.
- De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de arbitraire stift.
- De gezichtsboog parallel met de tafel richten door de gezichtsbooghoder.

### Het model van de bovenkaak ingipsen

- De houder van de oclusievork met de oclusievork in de gezichtsboog plaatsen.
- De oclusievork wordt ondersteund door de **CANDULOR instrumentenhouder met ajusteertafel**.
- Het bovenkaakmodel op de oclusievork plaatsen. De tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van het bovenste deel van de articulator.
- Het bovenkaakmodel met was vastzetten.
- Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het bovenste deel van de articulator sluiten.

### De condylusbaanhelling regelen op basis van het vlak van Camper of van het horizontale vlak van Frankfurt (Deutsche Horizontale)!!

Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45°

## UTS Transferboog Ivoclar Vivadent



### De articulator in de nulpositie plaatsen

- De condylusbaanhelling op 0° plaatsen.
- De centrische snelkoppeling sluiten.
- De verticale stift, de houder van de verticale stift en de incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghoder monteren.
- De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator gemonteerd.

### De overbrenging kan zowel axiaal als arbitrair worden uitgevoerd !!

#### Axiale overbrenging :

- De axiale stiften in de gezichtsboog moeten naar het midden gericht zijn. De axiale stiften worden op de articulator op het middelpunt van de assen geplaatst.

#### Arbitraire overbrenging:




- De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.
- De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de arbitraire stift.
- De gezichtsboog parallel maken met de tafel richten door middel van de gezichtsbooghoder.

### Het model van de bovenkaak ingipsen

- De houder van de oclusievork met de oclusievork in de gezichtsboog plaatsen.
- De oclusievork wordt ondersteund door de **CANDULOR instrumentenhouder met ajusteertafel**.
- Het bovenkaakmodel op de oclusievork plaatsen. De tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van het bovenste deel van de articulator.
- Het bovenkaakmodel met was vastzetten.
- Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het bovenste deel van de articulator sluiten.

### De condylusbaanhelling regelen op basis van het vlak van Camper of van het horizontale vlak van Frankfurt (Deutsche Horizontale)!!

Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45°

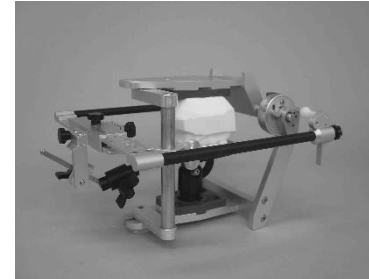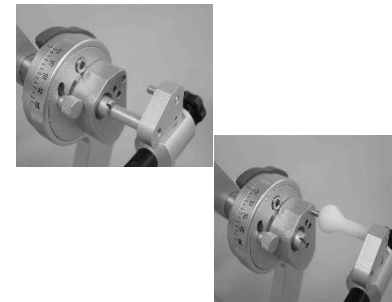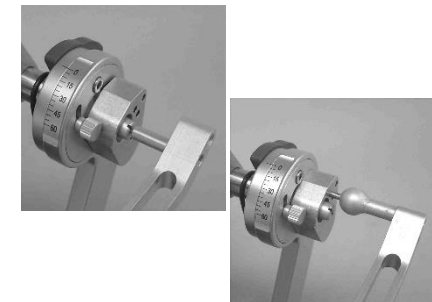

## Axioquick® SAM



### De articulator in de nulpositie plaatsen

- De condylusbaanhelling op **0°** plaatsen.
- De centrale snelkoppeling sluiten.
- De verticale stift, de houder van de verticale stift en de incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghouders monteren.
- De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator gemonteerd.



- De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.
- De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de arbitraire stift.
- De gezichtsboog parallel maken met de tafel richten door middel van de gezichtsbooghouders.

### Het model van de bovenkaak ingipsen


- De houder van de occlusievork met de occlusievork in de gezichtsboog plaatsen.
- De occlusievork wordt ondersteund door de **CANDULOR instrumentenhouder met ajusteertafel**.
- Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. De tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van het bovenste deel van de articulator.
- Het bovenkaakmodel met was vastzetten.
- Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het bovenste deel van de articulator sluiten.

**De condylusbaanhelling regelen op basis van het vlak van Camper of van het horizontale vlak van Frankfurt (Deutsche Horizontale)!!**

**Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45°**



## ARCUS® KAVO

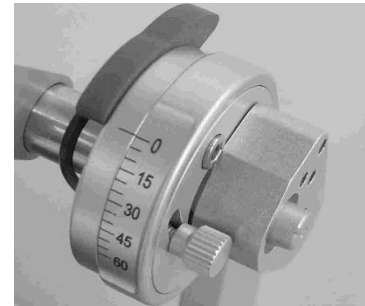

### De articulator in de nulpositie plaatsen

- De condylusbaanhelling op **0°** plaatsen.
- De centrale snelkoppeling sluiten.
- De verticale stift, de houder van de verticale stift en de incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghouders monteren.
- De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator gemonteerd.



- De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.
- De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de arbitraire stift.
- De gezichtsboog parallel maken met de tafel door middel van de gezichtsbooghouders.
- De houder van de occlusievork met de occlusievork in de gezichtsboog plaatsen.
- De occlusievork ingipsen op de **CANDULOR instrumentenhouder met ajusteertafel**.
- De aangezijsboog met de occlusievork van de CANDULOR-articulator afnemen.
- De verticale stift, de houder van de verticale stift en de incisaaltafel monteren en in de nulpositie plaatsen.



### Het model van de bovenkaak ingipsen

- Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. De tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van het bovenste deel van de articulator.
- Het bovenkaakmodel met was vastzetten.
- Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het bovenste deel van de articulator sluiten.

**De condylusbaanhelling regelen op basis van het vlak van Camper of van het horizontale vlak van Frankfurt (Deutsche Horizontale)!!**

**Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45°**

